

## はじめに

当社製品に対応した LabVIEW 計測器ドライバを使うことにより、PC から当社測定器をコントロールできます。しかし、一部の当社製品と PC を USB で接続するには、USB ドライバをインストールする必要があります。本書では対象製品を接続するために必要な USB ドライバをインストールする方法について説明します。

### 商標

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

### 免責事項

当製品の使用に関して、直接または間接に生じるいっさいの損害について、責任を負いません。

### 対象 LabVIEW ドライバおよび対象製品

YKDL750(DL750/DL750P)、YKDL1600(DL1620/DL1640)、YKDL1700(DL1720/DL1740/DL1720E/DL1740E/DL1740EL)  
YKDL7400(DL7440/DL7480)、YKSLI1400(SL1400)

### 動作に必要なシステム環境


- **プロセッサ**  
Pentium III/Celeron 866 MHz または同等以上のプロセッサ
- **オペレーティングシステム (OS)**  
Windows 7(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)

## ドライバのインストール (Windows 7、Windows 8)


1. **機器と PC を USB ケーブルで接続する (例：DL750 の場合)**  
DL750 と PC の電源を ON にします。両方とも正常に立ち上がったあと、USB ケーブルを接続します。
2. **デバイスマネージャーを開く**  
スタートメニューから**コンピューター**を右クリックします。  
表示されたメニューの**プロパティ (R)**をクリックします。  
システム画面左上に表示された**デバイス マネージャー**をクリックします。

### 3. デバイスの確認

[ほかのデバイス]より DL750 のデバイスが認識されていることを確認します。

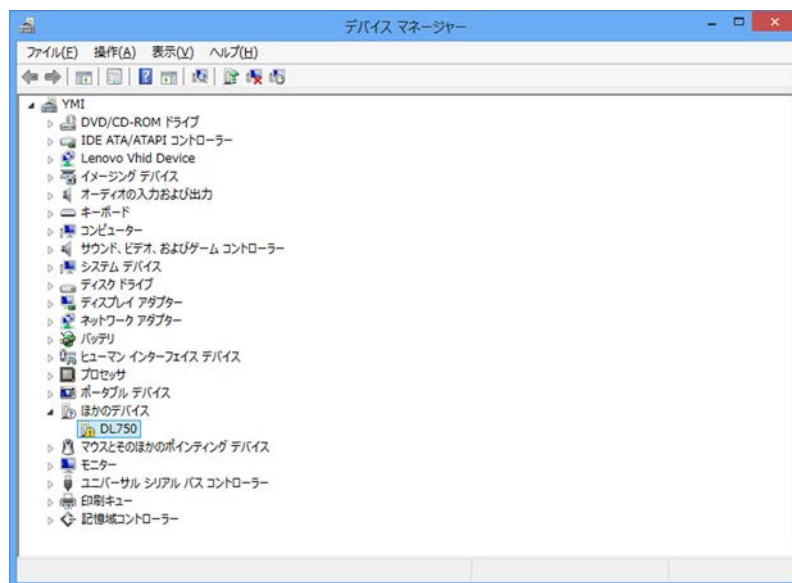


DL750 のデバイスのアイコンを右クリックします。プルダウンメニューが表示されます。  
**ドライバーソフトウェアの更新(P)...** をクリックします。

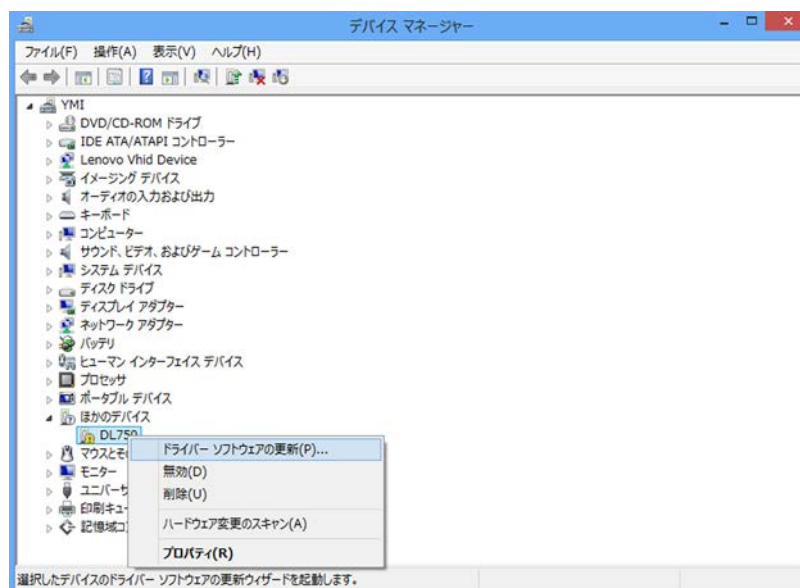


#### 4. ドライブの検索方法を指定する

コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します (R) をクリックします。

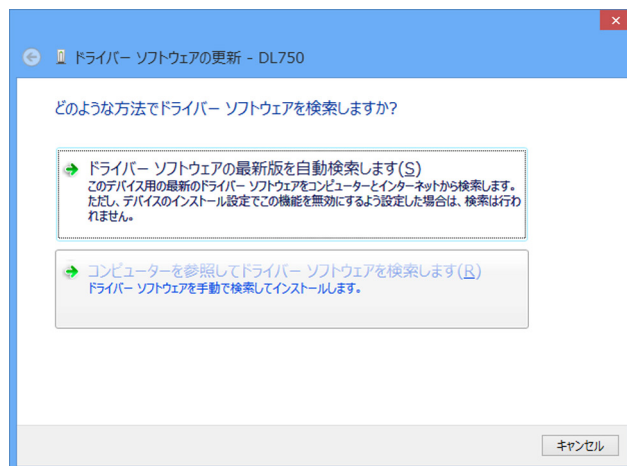


#### 5. ドライバの場所を指定する

参照 (R)... をクリックします。

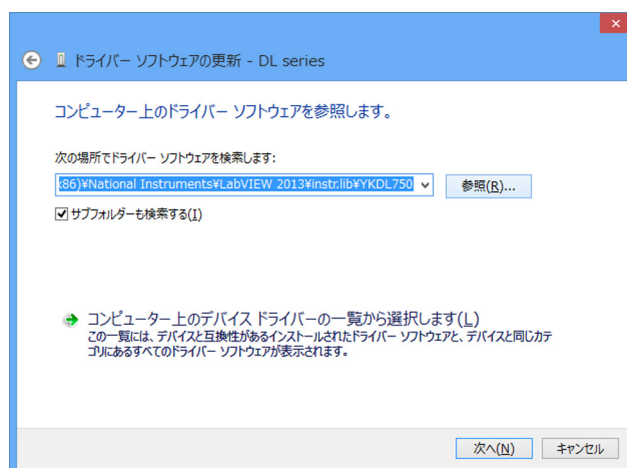


LabVIEW ドライバと同じフォルダ名 (C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW2013\instr.lib\YKDL750) を選択して、**OK** をクリックします。

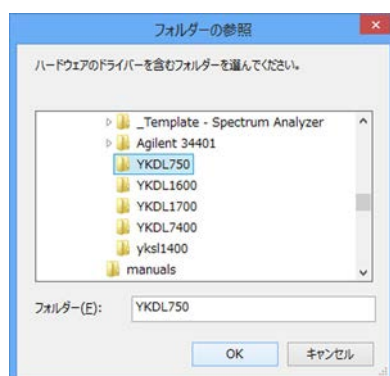

## 6. インストールする

次へ (N) をクリックします。ドライバの検索が開始されます。

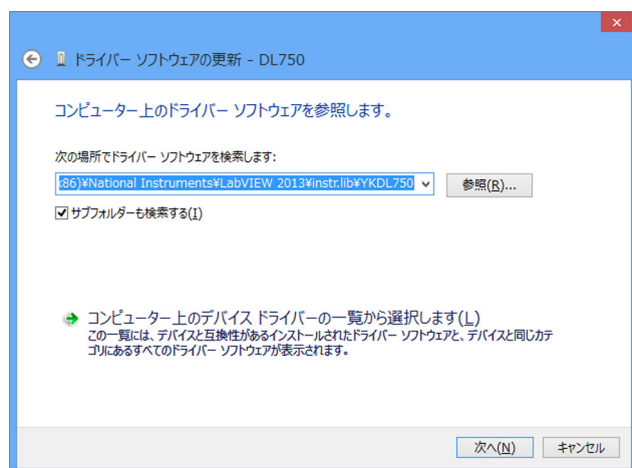

ドライバの検索が完了すると、インストール画面が表示されるので、インストール (I) をクリックします。



以下の画面が表示されます。閉じる (C) をクリックしてインストール完了です。

